

Solo Presso
Studi Medici




CE 0483

ENDYMED™ | PURE 2.0

Più potenza, più opportunità

RadioFrequenza 3Deep® - Multi Sorgente a Fase Controllata

- Nuova modalità rivoluzionaria di veicolare energia negli strati cutanei più profondi
- 6 Generatori di RF (unico apparecchio al mondo)
- 3 campi elettromagnetici contemporanei a flusso alternato e in fase
- Il primo campo spinge in profondità il secondo (come due calamite che si respingono)
- Il secondo allo stesso modo spinge in profondità il terzo campo magnetico
- Flusso di energia profondo, focalizzato e contenuto
- Minimo flusso di energia superficiale che elimina la necessità di raffreddamento della pelle
- Assolutamente sicura con 4 meccanismi di sicurezza:
 - Sensore di movimento: blocca il flusso di RF se il manipolo è fermo sulla pelle
 - Sensore di contatto: blocca il flusso di RF se il manipolo non è a pieno contatto con la pelle
 - Sensore di temperatura: blocca il flusso di RF se la temperatura sale troppo
 - Sensore d'impedenza: modifica l'output a seconda del variare dell'impedenza cutanea

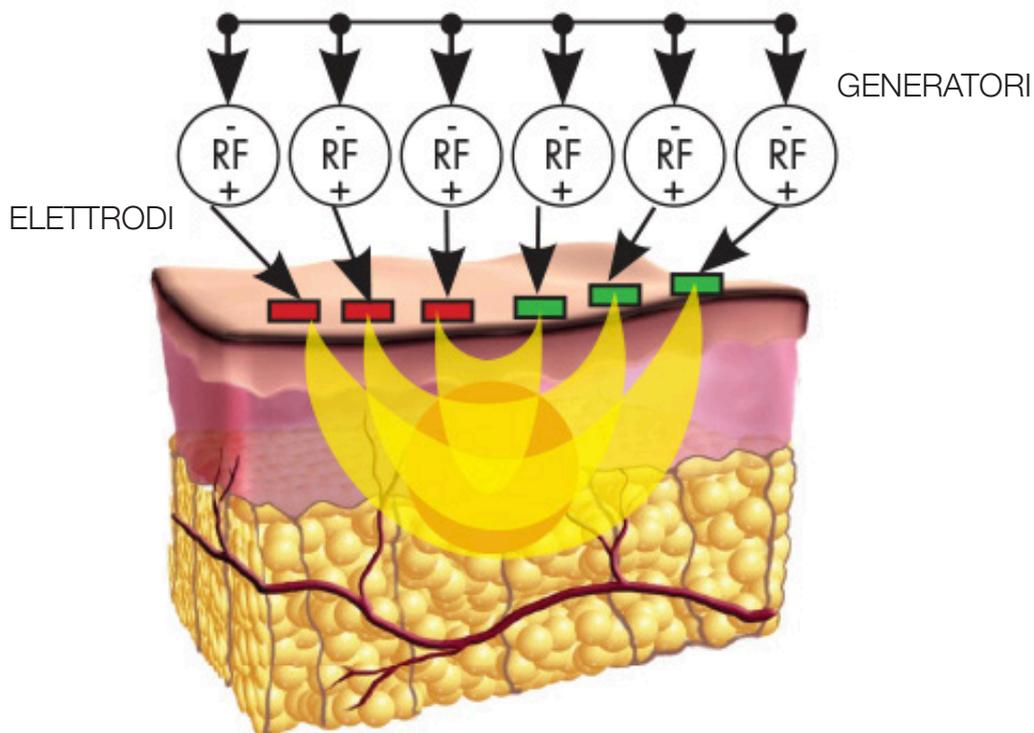

I vantaggi della nuova PURE 2.0

- Trattamenti più potenti la cui efficacia è validata clinicamente
- Con una potenza di 65W, PURE 2.0 offre trattamenti più efficaci che mai, incluso il trattamento di body contouring focalizzato
- 1 MHz di frequenza
- Trattamenti corpo più efficaci - PURE 2.0 è disponibile con il manipolo Shaper e il nuovo manipolo Mini-Shaper, per trattamenti focalizzati che oltre a rassodare la cute hanno efficacia nel creare apoptosi delle cellule adipose
- Grande novità: anche sulla PURE 2.0, il manipolo Microaghi Intensif con una profondità massima controllabile di 3,5 mm
- Nuovo e moderno design, completo di un display con touchscreen da 15 pollici e un'interfaccia visiva facile e veloce
- PURE 2.0 permette una completa flessibilità con manipoli di trattamento intercambiabili, offrendo al medico e ai suoi pazienti la gamma più efficace e completa di trattamenti richiesti disponibili ad oggi

La piattaforma EndyMed™ PURE 2.0 offre i seguenti trattamenti:

- Rassodamento e lifting del viso e riduzione delle rughe
- Rassodamento e contouring per il corpo
- Riduzione delle cicatrici acneiche e dell'acne attiva
- Resurfacing frazionale
- Miglioramento della texture cutanea
- Riduzione delle cicatrici traumatiche
- Trattamenti potenziati e clinicamente testati

Grazie a EndyMed™ PURE 2.0 il medico potrà offrire ai propri pazienti l'esperienza di trattamenti eccellenti con:

- Trattamenti sicuri, indolori ed efficaci al 100%, con minimo o nessun tempo di recupero
- Adatto a tutti i tipi e fototipi di pelle
- Risultati superiori di lunga durata
- Tempi di trattamento veloci – “trattamenti della pausa pranzo”

La PURE 2.0 è disponibile con un'ampia selezione di 6 manipoli di trattamento 3DEEP:

RF Focalizzata per Contouring e Rassodamento



Manipolo Shaper - Oltre ad un'efficacia unica per rassodamento e rimodellamento del corpo è indicato anche per la cellulite grazie alla sua capacità di penetrare a 11 mm di profondità e quindi fino allo strato adiposo sottocutaneo

Manipolo Mini Shaper - Raggiunge i 7 mm di profondità, specifico per contouring di sottomento, braccia e ginocchia



RF Frazionale e Microaghi



Manipolo FSR per resurfacing frazionale di viso e corpo - particolare manipolo che è in grado di generare spot da 112 micro coagulazioni o ablazioni superficiali, esattamente come un laser, per permettere un totale rinnovamento della pelle con sorprendenti risultati su rughe e cicatrici da acne e iperpigmentazione

Manipolo INTENSIF Microaghi - Per il trattamento di cicatrici acneiche, rughe profonde, smagliature e altri inestetismi che richiedono un riscaldamento frazionato profondo. Dotato di 25 microaghi placcati oro non isolati che rilasciano RF su tutta la lunghezza dell'ago e che possono raggiungere fino a 3,5mm. La potenza massima è 25W e l'attivazione è motorizzata



Rassodamento e Tonificazione



Manipolo Small - Ideale per rassodamento e tonificazione delle aree più piccole del corpo come viso, collo, braccia, ginocchia e zona periombelicale. Penetra fino a 4mm di profondità

Manipolo iFine - Progettato per ridurre rughe e lassità nelle zone più piccole e delicate come le aree periorbitali e periorali



La differenza 3DEEP®

PURE 2.0 è caratterizzata dall'innovativa tecnologia 3DEEP® approvata dall' FDA Americana. 3DEEP® di EndyMed™ è la tecnologia di Radiofrequenza più efficace e focalizzata disponibile ad oggi. A differenza delle radiofrequenze Monopolari o Bipolari, 3DEEP® è in grado di far penetrare energia negli strati più profondi della pelle in modalità controllata e contenuta, raggiungendo in profondità 52°C - 55°C, senza surriscaldare l'epidermide, generando il rimodellamento del collagene in modalità ottimale e indolore.



Per gentile concessione del Dr. Thierry Leva, Francia



Per gentile concessione della Dr.ssa Isabelle Rousseaux, Francia



Per gentile concessione del Dr. David J. Goldberg, USA

EndyMed™ – Un partner affidabile per lo studio medico:

- Sistema di trattamento flessibile e aggiornabile che migliora le prestazioni dello studio e permette al medico di avere sempre disponibili le ultime innovazioni offerte nelle tecnologie di Radiofrequenza
- 1 piattaforma, 6 manipoli per il trattamento completo di viso e corpo

EndyMed™

EndyMed™ Medical, fondata nel 2007, offre sistemi di trattamento energy based per la medicina estetica. La tecnologia di radiofrequenza 3DEEP®, brevettata da EndyMed™ e approvata dall'FDA, è la prima tecnologia RF multisorgente al mondo e rappresenta una soluzione altamente efficace per il trattamento non ablativo e frazionale di rughe, rassodamento della pelle, body contouring e cicatrici da acne.



DISTRIBUTORE IN ESCLUSIVA PER L'ITALIA:

Enermedica Srl - Via Umberto Giordano, 70 - 00124 Roma - info@enermedica.it - www.enermedica.it - 800 911 820



Ver. 09/2021