

Solo Presso
Studi Medici



FDA


CE 0483

ENDYMED™ | PRO

La piattaforma RF più completa

RadioFrequenza 3Deep® - Multi Sorgente a Fase Controllata

- Nuova modalità rivoluzionaria di veicolare energia negli strati cutanei più profondi
- 6 Generatori di RF (unico apparecchio al mondo)
- 3 campi elettromagnetici contemporanei a flusso alternato e in fase
- Il primo campo spinge in profondità il secondo (come due calamite che si respingono)
- Il secondo allo stesso modo spinge in profondità il terzo campo magnetico
- Flusso di energia profondo, focalizzato e contenuto
- Minimo flusso di energia superficiale che elimina la necessità di raffreddamento della pelle
- Assolutamente sicura con 4 meccanismi di sicurezza:
 - Sensore di movimento: blocca il flusso di RF se il manipolo è fermo sulla pelle
 - Sensore di contatto: blocca il flusso di RF se il manipolo non è a pieno contatto con la pelle
 - Sensore di temperatura: blocca il flusso di RF se la temperatura sale troppo
 - Sensore d'impedenza: modifica l'output a seconda del variare dell'impedenza cutanea

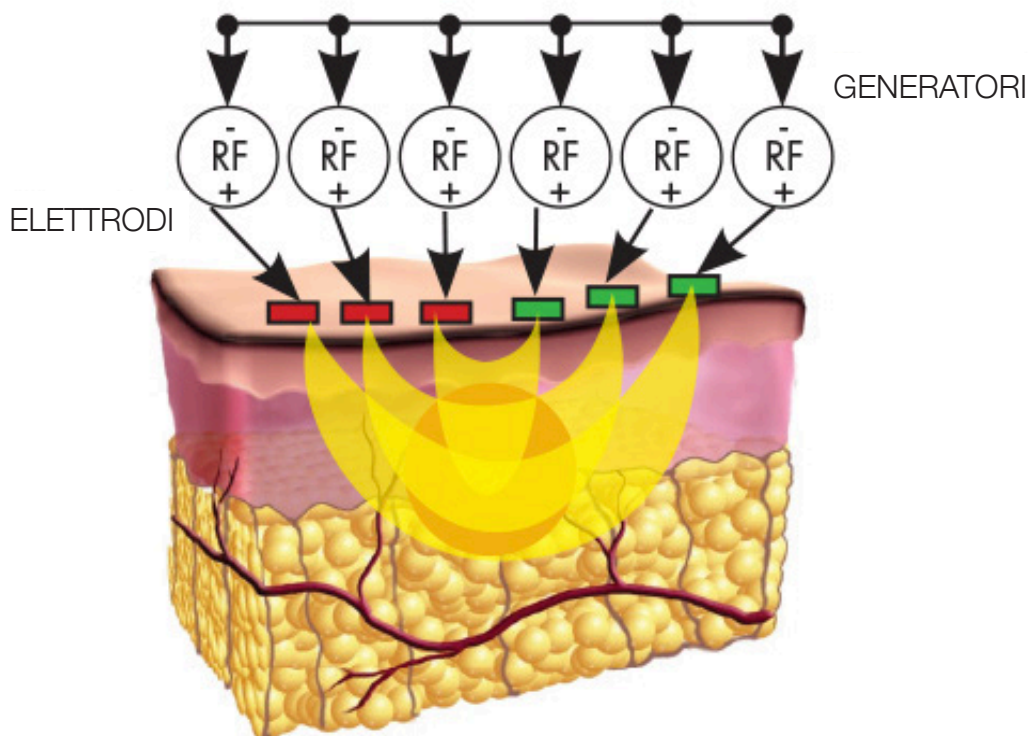

I vantaggi della PRO

- Trattamenti più potenti con efficacia validata clinicamente
- Con potenza di 85W, che equivale a 150W di una RF bipolare, EndyMed PRO offre trattamenti più efficaci che mai
- Manipolo Contour con vacuum pulsato che permette una penetrazione della RF fino a 26mm, l'ideale per cellulite e per ottenere apoptosi delle cellule adipose.
- Trattamenti corpo più efficaci – EndyMed™ PRO oltre al manipolo Contour è disponibile con i manipoli Shaper e il nuovo Mini-Shaper, per RF focalizzata per rassodare e creare apoptosi delle cellule adipose
- Nuovo manipolo frazionale a microaghi Intensif con una profondità massima regolabile da 0,1mm a 5 mm, eccezionale per cicatrici da acne, smagliature e per iperidrosi.
- Design moderno, completo di un display con touchscreen
- EndyMed PRO è l'unica piattaforma con 7 manipoli intercambiabili, dai microaghi, al frazionale, a quelli per riscaldamento volumetrico a varie profondità
- Manipoli raffreddati ad acqua per un maggiore comfort
- 1 MHz di frequenza

La piattaforma EndyMed™ PRO offre i seguenti trattamenti:

- Rassodamento e lifting del viso e riduzione delle rughe
- Rassodamento e contouring per il corpo
- Trattamento della cellulite
- Riduzione delle cicatrici acneiche e dell'acne attiva
- Resurfacing frazionale
- Miglioramento della texture cutanea
- Riduzione delle cicatrici traumatiche
- Iperidrosi

La PRO è disponibile con un'ampia selezione di 7 manipoli di trattamento 3DEEP®:

RF con Vacuum Pulsato



Manipolo Contour
Combina 3DEEP® con Vacuum Pulsato, è in grado di "risucchiare" 15 mm di tessuto permettendo il riscaldamento ad una maggiore profondità, da 16mm a 26mm

RF Focalizzata per Contouring e Rassodamento



Manipolo Shaper - Per rassodamento e rimodellamento del corpo, per la cellulite grazie alla sua capacità di penetrare a 11mm di profondità e quindi fino allo strato adiposo sottocutaneo

Rassodamento e Tonificazione



Manipolo Small - Ideale per rassodamento e tonificazione delle aree più piccole del corpo come viso, collo, braccia, ginocchia e zona periombelicale. Penetra fino a 4mm di profondità



Manipolo Mini Shaper
Raggiunge i 7 mm di profondità, specifico per contouring di sottotono, braccia e ginocchia



Manipolo iFine
Progettato per ridurre rughe e lassità nelle zone più piccole e delicate come le aree perioculari e periorali

Grazie a EndyMed™ PRO il medico potrà offrire ai propri pazienti l'esperienza di trattamenti eccellenti con:

- Trattamenti sicuri, indolori ed efficaci al 100%, con minimo o nessun tempo di recupero
- Adatto a tutti i tipi e fototipi di pelle
- Risultati superiori di lunga durata
- Tempi di trattamento veloci – "trattamenti della pausa pranzo"

RF Frazionale e Microaghi




Manipolo FSR per resurfacing frazionale di viso e corpo - particolare manipolo che è in grado di generare spot da 112 micro coagulazioni o ablazioni superficiali, esattamente come un laser, per permettere un totale rinnovamento della pelle con sorprendenti risultati su rughe e cicatrici da acne e iperpigmentazione



Manipolo INTENSIF Microaghi - Per il trattamento di cicatrici acneiche, rughe profonde, smagliature e altri inestetismi che richiedono un riscaldamento frazionato profondo. Dotato di 25 microaghi placcati oro non isolati che rilasciano RF su tutta la lunghezza dell'ago e che possono raggiungere fino a 5mm di profondità. La potenza massima è 25W e l'attivazione è motorizzata

La differenza 3DEEP®



La PRO è caratterizzata dall'innovativa tecnologia 3DEEP® approvata dall'FDA Americana. 3DEEP® di EndyMed™ è la tecnologia di Radiofrequenza più efficace e focalizzata disponibile ad oggi. A differenza delle radiofrequenze Monopolari o Bipolari, 3DEEP® è in grado di far penetrare energia negli strati più profondi del derma in modalità controllata e contenuta, raggiungendo in profondità 52° - 55°C, senza surriscaldare l'epidermide, generando il rimodellamento del collagene in modalità ottimale e indolore.

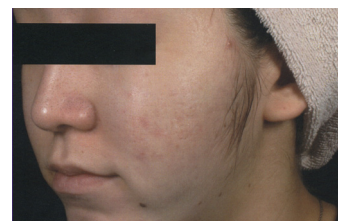

Per gentile concessione della Dr.ssa Masaki Sato, MD



Per gentile concessione della Dr.ssa Fiona Wright, MD

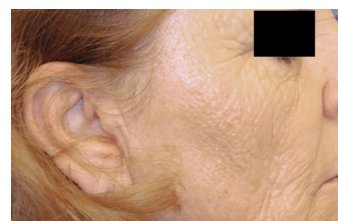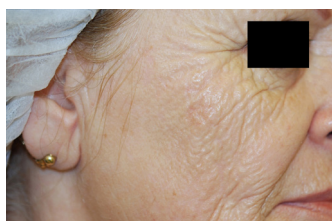

Per gentile concessione della Dr.ssa Monica Elman, MD

EndyMed™ – Un partner affidabile per lo studio medico:

- Sistema di trattamento flessibile e aggiornabile che migliora le prestazioni dello studio e permette al medico di avere sempre disponibili le ultime innovazioni offerte nelle tecnologie di Radiofrequenza
- 1 piattaforma, 7 manipoli per il trattamento completo di viso e corpo

EndyMed™

EndyMed™ Medical, fondata nel 2007, offre sistemi di trattamento energy based per la medicina estetica. La tecnologia di radiofrequenza 3DEEP®, brevettata da EndyMed™ e approvata dall'FDA, è la prima tecnologia RF multisorgente al mondo e rappresenta una soluzione altamente efficace per il trattamento non ablativo e frazionale di rughe, rassodamento della pelle, body contouring e cicatrici da acne.



DISTRIBUTORE IN ESCLUSIVA PER L'ITALIA:

Enermedica Srl - Via Umberto Giordano, 70 - 00124 Roma - info@enermedica.it - www.enermedica.it - 800 911 820



Ver. 09/2021